





پل ایده آل تجهیز

رولر میکسر هماتولوژی

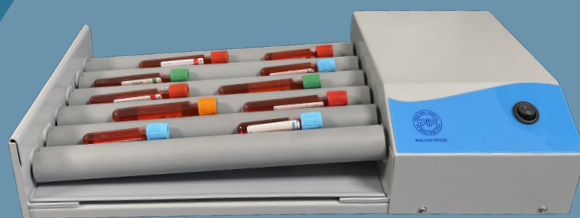

6 کاناله
PITR6B

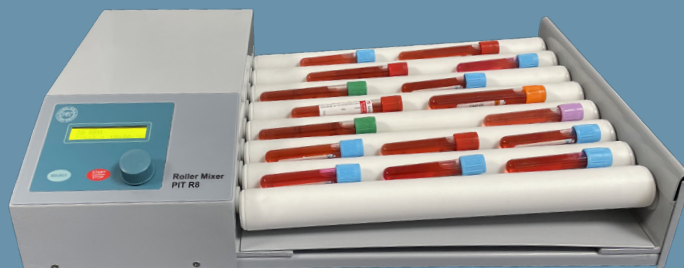

8 کاناله
PITR8



برای مشاهده اطلاعات
بیشتر اسکن کنید.



میکسرهای هماتولوژی PIT R6B و PIT R8

رولر میکسر (۶ کاناله)	رولر میکسر (۸ کاناله)	واحد	پارامترها
PIT R6B	PIT R8	-	کد کالا
۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴	۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۳۷	-	ایران کد
~۲۰	~۲۰	mm	دامنه حرکت قائم
۳۲۰ × φ ۳۲	۳۲۰ × φ ۳۲	mm	ابعاد غلتکها (قطر × طول)
۶۰	۸۰ الی ۲۰	rpm	سرعت چرخش
۲۱۰-۲۳۰	۲۱۰-۲۳۰	V~	ولتاژ ورودی
۵۰	۵۰	Hz	فرکانس
۲۰	۱۵	W	حداکثر توان
۶/۶	۹	kg	وزن تقریبی
-	دیجیتال	-	نمایشگر
-	۴۰ تا ۵	°C	دمای مجاز محیط
-	۸۰ %	-	حداکثر رطوبت نسبی مجاز
-	۹۹:۵۹':۵۹"	-	دامنه تایمر
۵۰۰ × ۲۵۰ × ۱۱۰	۵۰۰ × ۳۲۰ × ۱۰۵	mm	ابعاد تقریبی دستگاه

میکسرهای هماتولوژی PIT R6B و PIT R8، به ترتیب ۸ کاناله و ۶ کاناله بوده و مناسب برای مخلوط نمودن انواع نمونه‌های خونی، نمونه‌های ویسکوز، سوسپانسیون‌ها و ... می‌باشند. از ویژگی‌های عملکردی این دو دستگاه می‌توان به حرکت همزمان به صورت چرخشی و قائم غلتک‌ها اشاره نمود. ابعاد غلتک‌ها و فاصله‌ی آن‌ها به گونه‌ای طراحی شده است که می‌توان انواع مختلفی از لوله‌ها و بطری‌ها را برای مخلوط نمودن بر روی آن‌ها قرار داد. جهت جمع‌آوری آسان و حفظ پاکیزگی در صورت ریختن ناگهانی نمونه، در زیر غلتک‌ها، سینی محافظ قابل شستشویی تعبیه شده است. بدنه و رنگ میکسر هماتولوژی در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه‌ها مقاوم است.